

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™



Axano

Cuando la innovación se une a la fascinación

dentsplysirona.com/axano





Axano

Cuando la innovación se une a la fascinación.

Toda innovación empieza con una idea. Se necesita la valentía para cuestionarlo todo y el impulso para no dormirse nunca en los laureles.

En Dentsply Sirona, este es el camino que seguimos con nuestras innovaciones y con todo lo que hacemos. Nos esforzamos por ofrecer la mejor experiencia posible con cada nueva generación de nuestras unidades de tratamiento.

¿Cómo lo conseguimos? Centrándonos no solo en lo que importa hoy, sino también en lo que importará mañana y en los próximos años. Combinamos diseño y funcionalidad para crear soluciones inteligentes equipadas con flujos de trabajo digitales que te ofrezcan todavía más opciones de tratamiento y flujo de trabajo. Es decir, adoptando un planteamiento holístico de la innovación.

Porque la innovación se une a la fascinación cuando todo funciona a la perfección y permite que te concentres totalmente en tus pacientes.



Cuando la innovación se une a la fascinación. El tratamiento dental se convierte en una experiencia.

Axano es sinónimo de una experiencia de tratamiento excepcional. La excelente combinación de innovación, intuición y los beneficios de una unidad de tratamiento moderna pueden adaptarse a tus necesidades. Las actualizaciones periódicas del software garantizan que la unidad de tratamiento siga siendo de última generación ahora y en el futuro.

Diseño inteligente

Axano combina un diseño inteligente con un alto nivel de comodidad y funciones de tratamiento innovadoras. Sus líneas estilizadas, la luz ambiental y la Smart Touch se unen para crear un diseño moderno y elegante.

Flujos de trabajo excelentes

Axano ofrece flujos de trabajo excelentes que hacen que los tratamientos resulten más cómodos y eficientes y que los procesos de higiene sean más fiables, lo que amplía los beneficios para tu clínica y los pacientes.

Experiencia digital

Cuando la facilidad de uso mejora la satisfacción: la innovadora interfaz de usuario Smart Touch ofrece una experiencia digital que puede ajustarse a tus necesidades personales.





Smart Touch: la interfaz de usuario intuitiva

Smart Touch es una pantalla interactiva que ofrece funciones claras y estructuradas y una innovadora tecnología multitáctil. La interfaz de usuario puede personalizarse con facilidad para adaptarse a tus necesidades.



Smart Delivery Pro: la guía deslizante motorizada

Smart Delivery Pro pone el elemento del dentista a tu alcance en todo momento y se ajusta a tu altura de trabajo con la función de ajuste de altura automatizado para que puedas tratar a tus pacientes de forma ergonómica.



Smart Control: el pedal de control ergonómico

Smart Control es un elemento de control multifuncional: te ayuda durante el manejo de la unidad de tratamiento. Accede a funciones esenciales al instante sin usar las manos. Esta función intuitiva permite que tu cabeza y tus manos estén libres para que el tratamiento sea ergonómico.



Diseño inteligente

Cuando el rendimiento se une a la inspiración.

Tratar a pacientes es agradable con Axano.




Cuando el diseño se une al rendimiento. Combina la funcionalidad con la elegancia.

Los elementos del dentista y el auxiliar de Axano cuentan con un diseño innovador, elegante y minimalista concebido para ofrecer una calidad y eficiencia excepcionales. Además, la nueva pantalla Smart Touch y su moderna superficie de cristal fácil de limpiar hace que los tratamientos sean intuitivos. La luz ambiental integrada le da un elegante toque de color a tu clínica y cuenta con ajustes de color personalizables que puedes modificar para que encaje con el concepto de iluminación existente.

Smart Touch

La gran pantalla Smart Touch de 10,3" ofrece un alto nivel de comodidad y su manejo resulta sencillo e intuitivo. La unidad de tratamiento Axano, equipada con una amplia gama de opciones personalizables, ofrece una nueva experiencia de diseño. Además, la superficie de cristal de alta calidad encaja a la perfección con el diseño general y permite que la limpieza y el mantenimiento sean fáciles y eficientes.



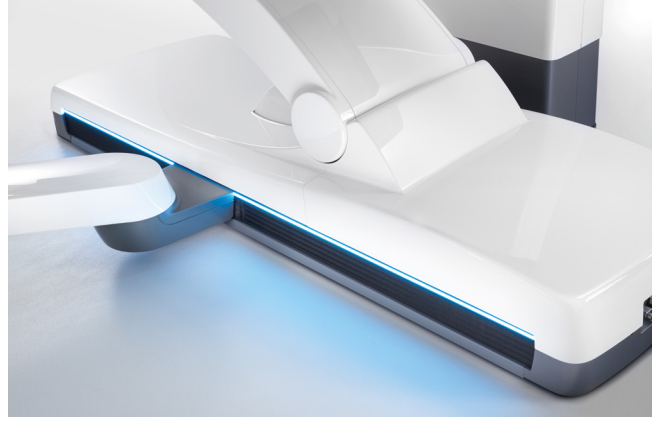

Luz ambiental

La sutil luz ambiental de los elementos del dentista y el auxiliar y la Smart Delivery Pro hacen que el ambiente sea agradable y relajado. Además, la variedad de opciones de color te permite crear una atmósfera única diseñada para encajar con la estética de la clínica. Por ejemplo, la luz ambiental verde indica que se está ejecutando el proceso de higiene. También es posible seleccionar colores específicos para que combinen con la tapicería.



Cuando la exclusividad se une al color. Saca a relucir tus gustos en cuanto al diseño.

Axano acapara el protagonismo de tu sala de tratamiento, así que el diseño juega un papel importante a la hora de establecer el ambiente adecuado para ti y tus pacientes. Somos conscientes de lo importante que es; por lo tanto, durante la fase de desarrollo nos centramos en garantizar que cada una de nuestras unidades sea robusta y se construya con acabados de alta calidad para una durabilidad excepcional que soporte años de uso diario.

Además, puedes elegir entre varios colores de tapicería. Asimismo, puedes seleccionar la innovadora y suave tapicería Lounge para ofrecer una comodidad excelente a tus pacientes. Esta opción también incluye más posibilidades de personalización, como la selección del color de las costuras.

Colores de la tapicería

El mundo de la elegancia



Carbon*

Merlot*

Platinum

Pacific*

Prune*

El mundo natural



Umbra*

Sapphire

Basalt*

Cherry

Sierra*

El mundo de la vitalidad



Aloe

Aqua

Flamingo

Orchid*

* También disponible para la tapicería Lounge.

Colores de las costuras**



Estándar

Rojo

Gris oscuro

Azul claro

Rosa

** Solo disponible para la tapicería







Flujos de trabajo excelentes

Cuando la fiabilidad se une a la eficiencia.
Te permite tener más tiempo para centrarte en lo que más importa.



Cuando la eficiencia se une a la flexibilidad. Tú estás ahí para tus pacientes.

Cada proceso está perfectamente coordinado para garantizar que cada movimiento cuente. Exactamente como tú necesites que sea. Tanto si estás realizando el tratamiento solo como si lo haces en colaboración con tu equipo, Axano puede adaptarse a lo que necesites en cada momento y ofrece flujos de trabajo eficientes y una comodidad de manejo excelente, lo que te beneficia a ti y a tus pacientes.

Posicionamiento de los instrumentos optimizado gracias al concepto de división

Los elementos del dentista y el auxiliar, así como la bandeja, se pueden posicionar de forma rápida e independiente, lo que te da flexibilidad para pasar de realizar el tratamiento en equipo a solo. Asimismo, hay una bandeja adicional en todo momento para más comodidad.





Conexiones de instrumentos 6+2

Tus elementos de trabajo y control principales están colocados de forma clara gracias a las 6 posiciones de instrumentos y pueden configurarse libremente para satisfacer tus requisitos. Además, la cámara puede guardarse en un soporte adicional. También puede conectarse un motor eléctrico adicional para los tratamientos de implantología.



Elemento del auxiliar

El elegante y limpio diseño del elemento del auxiliar ayuda al equipo de la clínica en su trabajo diario gracias a opciones de control mejoradas.



LEDview Plus

LEDview Plus ofrece una intensidad, un color y tamaño de campo lumínicos excepcionales a fin de crear la luz adecuada y una visibilidad excelente para cada tratamiento. El modo composite integrado te permite emplear todo el tiempo que necesites para el procesamiento de materiales de obturación sin que estos se endurezcan demasiado rápido. La lámpara puede posicionarse de forma individual y manejarse mediante un sensor sin contacto.



Escupidera motorizada

La escupidera está motorizada, lo que permite girarla hacia dentro o hacia fuera según sea necesario. Además, la posición de enjuague es programable, lo que ayuda a garantizar que el tratamiento sea rápido y seguro.

Cuando la postura se une a la ergonomía. Haz que tu jornada laboral sea más fácil.

Mucho más que una postura sana: una ergonomía excelente es vital en el trabajo. Los flujos de trabajo pueden automatizarse y ahorrarte tiempo solo si cada movimiento se ejecuta con precisión. Y, sobre todo, puedes evitar que tu cuerpo se tense.

Tratamiento estando de pie

La función de ajuste del elemento del dentista mueve automáticamente la Smart Delivery Pro hasta tu posición de trabajo. También te permite tratar a tus pacientes estando de pie, proporcionando una nueva opción ergonómica.

Reposacabezas motorizado

Para el posicionamiento de los pacientes, puede recordar la configuración de inclinación y extensión del reposacabezas de cada uno*, así como la posición del sillón.

*Solo con Sidexis 4.





Posicionamiento vertical de la boca

Axano sabe y guarda tu altura ergonómica de trabajo y mueve automáticamente la posición de la boca de tus pacientes al punto más adecuado para ti. Esta excelente función siempre coloca la boca de los pacientes en la misma posición de tratamiento guardada para los maxilares superior e inferior, independientemente de cuál sea la altura del paciente.



Posicionamiento ergonómico del paciente

La función ErgoMotion sincroniza los movimientos del respaldo y el asiento para un excelente posicionamiento ergonómico de la columna. Además, tus pacientes se podrán relajar durante el tratamiento con la función de masaje y soporte lumbar. Los motores del sillón son silenciosos y se pueden seleccionar distintas velocidades.

Cuando la preparación se une a la seguridad. Ejecuta los tratamientos con un alto nivel de excelencia.

Las funciones de tratamiento Endo, Implant y FACE guían tu flujo de trabajo y aumentan la seguridad clínica. La integración de estas funciones asegura una transición fluida entre el diagnóstico, la explicación y el tratamiento. Durante los tratamientos de endodoncia o implantología, la interfaz de usuario Smart Touch muestra los pasos de forma clara y comprensible. Además, el uso de Smart Control o Smart Touch permite un manejo intuitivo y sin manos.


Funciones de implantología

Con la función Implant, puedes seleccionar el sistema de implantología específico que vas a utilizar desde la biblioteca integrada. Además, se incluyen los parámetros esenciales, como la velocidad, el par, y la cantidad de refrigerante, lo que garantiza que el proceso de implantología sea seguro y eficiente. Gracias a la función de implantología integrada, no se necesitan dispositivos externos y el trabajo es eficiente, estéril y se realiza sin manos.

Funciones de endodoncia

La precisión del control de torque, ApexLocator, y la exclusiva biblioteca de limas hacen que tus flujos de trabajo sean más sencillos al tiempo que garantizan un alto nivel de seguridad clínica. Además, la moderna visualización del progreso y la selección de las limas facilitan el trabajo. El parámetro de complejidad de la endodoncia optimiza el torque y la velocidad de las limas, lo que reduce el riesgo de reprocesamiento.

El proceso y el progreso del tratamiento se pueden visualizar en el monitor Sivision*.

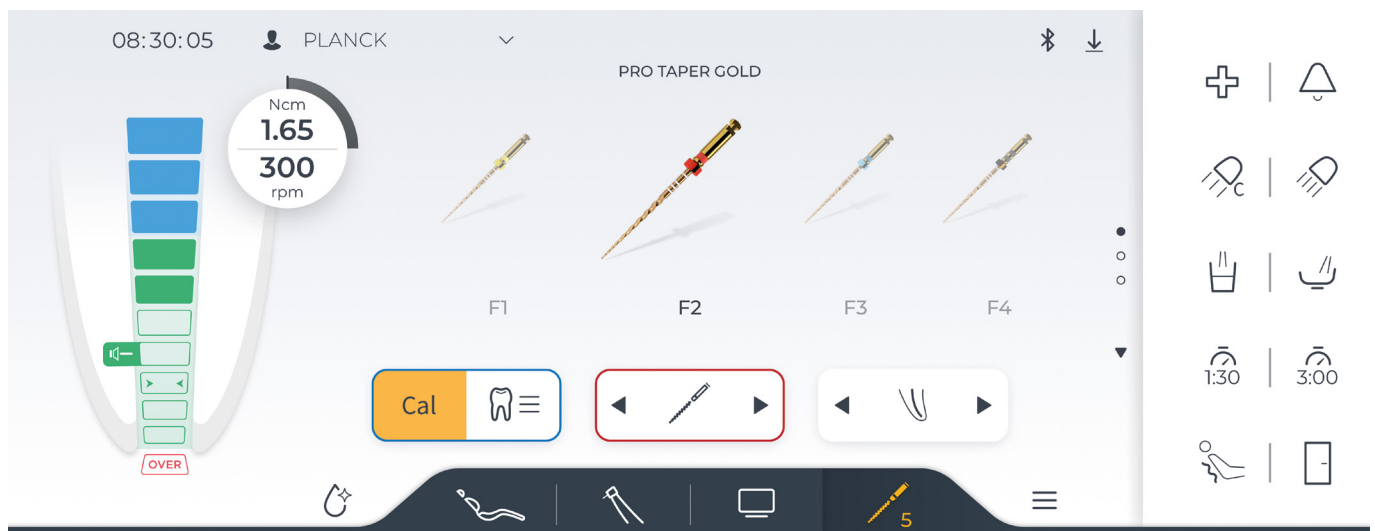

*Solo con Sidexis 4.

Función FACE (detección de caries asistida por fluorescencia)

La función FACE te permite detectar caries durante la excavación. La luz fluorescente muestra las zonas con caries. La luz integrada en la pieza de mano te sirve de apoyo durante el flujo de trabajo; simplemente se debe activar FACE, revisar y, a continuación, llevar a cabo el tratamiento como de costumbre.



Cuando la comunicación se une a la confianza. Mejora la relación con tus pacientes.


Una comunicación excelente es la clave para generar confianza y una buena relación con los pacientes. Por este motivo, Axano incorpora varias herramientas que ayudan a que estos comprendan el tratamiento y acepten los casos. Con la cámara SiroCam AF+ y el monitor Sivision de 22" de la unidad de tratamiento, puedes hablar sobre imágenes intraorales, radiografías o impresiones digitales con tus pacientes mientras están en el sillón. Puedes explicarles el tratamiento paso a paso, lo que ayuda a que se sientan más cómodos y tengan una mayor confianza en tu propuesta.





Monitor Sivision

Puedes aumentar la transparencia del tratamiento mostrando los distintos medios que citas en tu diagnóstico en el monitor Sivision de 22". Los pacientes se sentirán incluidos en el proceso y el elemento visual ayudará a que comprendan mejor la situación y la valoración clínica.

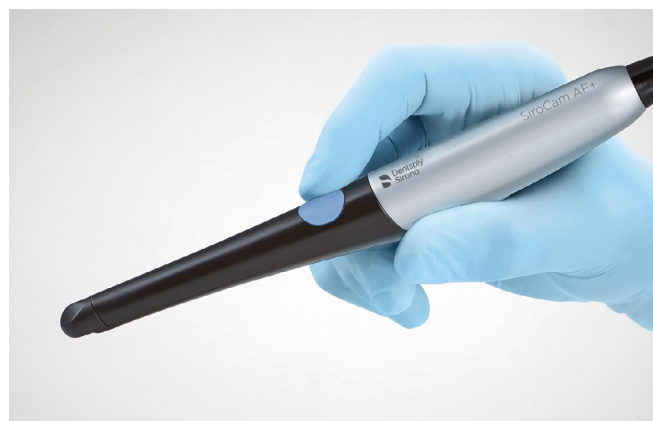

SiroCam AF+

Optimiza la visualización y documentación de tu tratamiento. La SiroCam AF+ ofrece una alta calidad de imagen y un manejo sencillo gracias a la función de enfoque automático. Además, cuando se combina con el monitor Sivision de 22", puedes visualizar las imágenes inmediatamente para contemplar de forma clara y eficiente el caso.



Procesamiento de imágenes

Puedes seleccionar y editar imágenes intraorales directamente en la interfaz de usuario Smart Touch. Por ejemplo, puedes marcar con color las imágenes y añadir notas, lo que te permite documentar los resultados clínicos de forma más rápida y precisa. Durante la consulta, puedes mostrar varios medios directamente desde la base de datos en el elemento del dentista como ayuda adicional.



Soporte de dispositivo inteligente

Más opciones: puedes utilizar el soporte de dispositivo inteligente para integrar la tablet de la clínica en los flujos de trabajo de los tratamientos. Simplemente se debe fijar en el soporte magnético del elemento del dentista y hacer que forme parte activa de la comunicación con los pacientes. Por ejemplo, cuando se utilice la aplicación Sidexis iX para comunicar el diagnóstico y el tratamiento; es sencillo, rápido y se realiza sin manos.

Cuando la higiene se une a flujos de trabajo excelentes. Ahorra un tiempo valioso.

Conseguir un alto grado de higiene con el mínimo esfuerzo puede convertirse en la norma con Axano. Todo se ha concebido para llevar a cabo medidas de higiene eficientes, desde superficies lisas y fáciles de limpiar hasta componentes extraíbles y adaptadores de desinfección integrados.

Procesos de higiene guiados

El panel de higiene de la Smart Touch muestra qué medidas de higiene se deben llevar a cabo en breve. También puedes usar este panel para iniciar las medidas de higiene automáticas de purga periódica y desinfección mensual intensiva. Por ejemplo, con tan solo tocar un botón, los tubos de los instrumentos y de succión y la escupidera se purgarán automáticamente con un producto de limpieza.

La luz ambiental sirve de apoyo a las medidas de higiene, ya que muestra cuando se está ejecutando un proceso, lo que permite que el equipo de la clínica vea el estado de la unidad a distancia, lo que ahorra tiempo y evita la necesidad de acercarse.





Adaptador de desinfección para la limpieza de tubos de instrumentos

Los adaptadores de desinfección integrados y extraíbles garantizan una limpieza y desinfección fiable de los tubos de los instrumentos con el dispositivo de desinfección incorporado. Para purgar las tuberías de agua de forma periódica, simplemente se deben conectar los tubos de los instrumentos a los adaptadores de desinfección.



Conectores extraíbles para una fácil limpieza de los tubos de succión

Los tubos de succión pueden purgarse automáticamente con solo tocar un botón entre tratamientos o a lo largo de tratamientos más largos. El producto de limpieza se añade automáticamente. La escupidera también puede incluirse en el proceso de limpieza.



Piezas extraíbles

Todas las piezas que son críticas para mantener la higiene son extraíbles, esterilizables o desinfectables térmicamente a fin de aumentar la protección frente a la contaminación cruzada. La escupidera también se puede extraer para limpiarla rápida y fácilmente.



Superficies de fácil mantenimiento

Axano está diseñada para mantener la higiene de forma eficiente. Las superficies son lisas y fáciles de limpiar y desinfectar.



Dentsply
Sirona

Experiencia digital

Cuando el flujo de trabajo se une a la intuición.

La personalización está
justo al alcance de tu mano.





Cuando la digitalización se une al diseño.
Estás al mando de todo el proceso.



Visualización clara

La información importante se muestra claramente con iconos e imágenes fáciles de reconocer.

Personalización

La función “arrastrar y soltar” te permite reorganizar de forma rápida y sencilla los botones de la interfaz de usuario y colocarlos donde los necesites para acceder más fácilmente.

Con la Smart Touch, se puede acceder a todas las funciones esenciales de forma rápida y sencilla y el manejo es intuitivo. Además, puedes personalizar la posición de los botones y las funciones en la interfaz de usuario con la característica “arrastrar y soltar”, que te permite diseñar la pantalla de acuerdo con tus preferencias y necesidades sin tener que desviar la atención del paciente.



Control de los medios

Puedes acceder, editar y controlar los medios mediante la Smart Touch sin tener que usar nunca otro ordenador.

Fácil de usar

El nuevo diseño y las opciones de personalización garantizan un manejo intuitivo.

Cuando la dinámica se une al flujo de trabajo digital. Trabaja en un proceso sin fisuras.

Axano puede integrarse perfectamente en los procesos de tu clínica y puede ofrecerte a ti y a tus pacientes una experiencia digital fascinante. Accede a datos de pacientes o medios guardados y guía a tus pacientes de forma transparente a lo largo de su tratamiento.

Control de las aplicaciones del ordenador con la Smart Touch

La interfaz de usuario Smart Touch te permite controlar el tratamiento, así como experimentar los beneficios de una clínica conectada directamente en la unidad de tratamiento.

El software Sivision View se integra perfectamente con Sidexis 4

El Sivision View te ayuda durante la consulta y cuando tienes que explicar el tratamiento a tus pacientes. Puedes mostrar archivos tales como radiografías, presentaciones o vídeos de la base de datos de medios. Además, puedes guardar las posiciones de tratamiento de cada paciente, y el plug-in Endo permite la visualización del ApexLocator en el monitor*.

*Se necesita Sidexis 4.



Cuando el servicio se une a la conexión. Tienes el servicio adecuado a tu disposición.

El servicio de Axano es como la propia Axano: eficiente y digital. Si dispones de una Axano registrada, recibirás ayuda rápida y directa cuando necesite mantenimiento. Mejora el rendimiento de la unidad de tratamiento mediante la prevención de averías. Con el software de mantenimiento de Axano, puedes planificarlo fácilmente y minimizar los tiempos de inactividad.



Tu Axano.

Paquetes de descuento y equipamientos individuales.



Clínica

- 2x motor eléctrico BL ISO (alternativamente BL E)
- Tubo de turbina
- Mango ultrasónico SiroSonic TL
- Lámpara de tratamiento LEDview Plus
- Hasta dos taburetes de trabajo a precio rebajado



Endo

- Función de endodoncia (incluye sistemas de limas recíprocas)
- ApexLocator que se visualiza en el monitor Sivision
- Contra-ángulo T1 Line Endo 6 L con luz



Implant

- Función de implantología
- Bomba integrada de suero fisiológico
- Motor eléctrico BL Implant E con luz
- Contra-ángulo Implant 20:1



Sivision

- Fuente de alimentación de la cámara en el elemento del dentista
- SiroCam AF+
- Sivision monitor 22"
- Columna de soporte de lámpara con adaptador para el monitor (carga adicional por la bandeja para montaje del monitor)



Kit ApexLocator



Bomba integrada de suero fisiológico



Motor eléctrico BL Implant E (con luz)



Juego de válvulas para dispositivos externos



Bandeja de almacenamiento para lámpara de fotocurado SmartLite Pro



SiroCam AF+ en soporte adicional



Monitor Sivision de 22" sobre columna de soporte de lámpara o bandeja



Soporte de dispositivo inteligente para tableta



Taburetes de trabajo Hugo, Theo, Carl



Heliobent Plus, modelo para unidad



Visor de radiografías panorámicas



Reposabrazos

Tus opciones individuales.

Esta es la lista de equipamientos completa de las unidades básicas, así como de todas las funciones opcionales.

Sillón del paciente	
Posiciones de sillón específicas para cada paciente*	■
Reposacabezas motorizado con ajustes automáticos específicos para cada paciente*	■
Luz ambiental	■
Tapicería premium Thermo	■
Tapicería Lounge, con costuras de color previa solicitud	□
Soporte lumbar / función de masaje	■
Reposabrazos giratorio, derecho	□
Reposabrazos, izquierdo	□
Conmutador de pedal de cuatro vías	■
Smart Control	■
Juego de válvulas para dispositivos externos	□
Cojín elevador para pacientes pequeños	□
ErgoMotion	■
Velocidad de desplazamiento ajustable	■

Elemento del dentista (con Smart Touch, 6 posiciones, mangos extraíbles y soporte de instrumentos)	
Sprayvit con luz	□
1.er accionamiento (para motor o turbina)	■
2.o accionamiento (para motor o turbina)	■
3.er accionamiento (para motor o turbina)	■
4.o accionamiento (para motor o turbina)	□
Motor eléctrico BL E	□
Motor eléctrico BL ISO F	□
Tubo de turbina	■
Mango ultrasónico SiroSonic TL	□
Función FACE (detección de caries asistida por fluorescencia)	□
Función de implantología	□
Bomba integrada de suero fisiológico	□
Motor eléctrico BL Implant E	□
Contra-ángulo Implant 20:1	□
Función endodoncia (incluye sistemas de limas recíprocantes)	□
ApexLocator que se visualiza en el monitor Sivision	□
Contra-ángulo T1 Line Endo 6 L con luz	□
Interfaz USB	■
Manejo sin manos con control del cursor	■
Soporte de dispositivo inteligente para tableta	□
Visor de radiografías panorámicas	□

Elemento del auxiliar (con pantalla táctil, 4 posiciones, soporte extraíble)	
Sprayvit con luz	□
Dispositivo de succión	■
Eyector de saliva	■
Dispositivo quirúrgico de succión	□
2.º kit HVE	□
Bandeja almacenamiento para lámpara de fotocurado SmartLite Pro	□
Conexión de 12 V para uso médico	□

Unidad de agua	
Dispositivo de desinfección con función de desinfección y saneamiento permanente	■
Limpieza química del tubo de succión y la escupidera	■
Válvula de escupidera para sistema de succión húmeda	■
Separador automático	□
Separador de amalgama	□
Bol de escupidera de cristal giratorio, motorizado y extraíble	■
Sistema de higiene con módulos de limpieza extraíbles y función autopurga	■
Función agua (suministro de agua independiente)	■

Comunicación con los pacientes	
SiroCam AF+	□
Monitor Sivision de 22", sobre bandeja, incluye bandeja	□
Monitor Sivision de 22" sobre columna de soporte de lámpara	□
Fuente de alimentación de la cámara en el elemento del dentista	□
Conjunto de cables para conexión a ordenador	□

Taburetes de trabajo (muelle de gas corto o largo opcional)	
Hugo Freehand (con pedal)	□
Hugo Manual (con control manual)	□
Hugo Manual Plus (con control manual y anillo para pies)	□
Carl Manual (con control manual)	□
Carl Manual Plus (con control manual y anillo para pies)	□
Theo con asiento tipo silla de montar	□

Opciones adicionales	
Bandeja Sirona	□
LEDview Plus, modelo para unidad	■
LEDview Plus, modelo de techo	■
Adaptador para Heliodent Plus / LEDview Plus (combinación de techo)	□
Adaptador para Heliodent Plus, modelo para unidad	□
Espejo para pacientes	□
Soporte de cámara en la lámpara	□

■ Incluido en la unidad o en el paquete básicos

□ Opcional

*Disponible con Sidexis 4.

Dentsply Sirona

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31, 64625 Bensheim, Germany
dentsplysirona.com

Soluciones

Preventiva
Restauradora
Ortodoncia
Endodoncia Implantes
Prótesis

Tecnologías de apoyo

CAD/CAM
Radiología
Unidades de
tratamiento
Instrumentos